

DE

Funktionsweise von Gynofit Befeuchtungs-Gel

Gynofit Befeuchtungs-Gel ist ein wässriges Vaginal-Gel welches einen dünnen Feuchtigkeitsfilm auf der Scheidenwand bildet und so die Schleimhaut befeuchtet.

Zweckbestimmung


Gynofit Befeuchtungs-Gel wird zur symptomatischen Linderung von vaginaler Trockenheit (besonders bei dünner, anfälliger, verletzlicher Schleimhaut) und den damit verbundenen Beschwerden eingesetzt.

Es befreit von vaginaler Trockenheit aufgrund hormoneller Veränderungen wie Geburt, Krebstherapie und Menopause, insbesondere auch während der Schwangerschaft.

Darüber hinaus werden als irritativ empfundene Symptome wie Brennen oder Juckreiz gelindert und somit das körperliche Wohlbefinden gefördert.

Gynofit Befeuchtungsgel ist auch ideal zur Unterstützung bei Geschlechtsverkehr.

Gynofit Befeuchtungs-Gel beugt Irritationen vor.

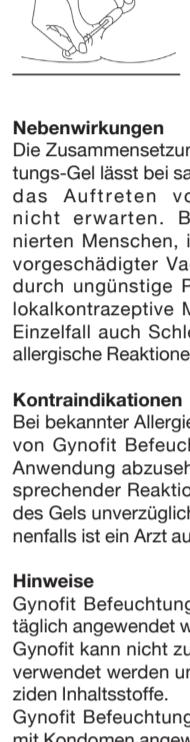

1. Schütteln des Tubeninhaltes gegen die Tubenspitze
2. Abbrechen der Spitze der Tube durch Abdrehen.
3. Einführen des Applikators in die Scheide.
4. Vollständiges Ausdrücken des Inhalts in die Scheide.

Nebenwirkungen

Die Zusammensetzung von Gynofit Befeuchtungs-Gel lässt bei sachgemäßer Anwendung das Auftreten von Nebenwirkungen nicht erwarten. Bei hierfür prädisponierten Menschen, insbesondere auch bei vorgeschrägter Vaginalschleimhaut etwa durch ungünstige Pflege-, Hygiene- oder lokalkontrazeptive Maßnahmen können im Einzelfall auch Schleimhautreizungen oder allergische Reaktionen auftreten.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen die Inhaltsstoffe von Gynofit Befeuchtungs-Gel ist von der Anwendung abzusehen; bei Auslösung entsprechender Reaktionen ist die Anwendung des Gels unverzüglich abzubrechen; gegebenenfalls ist ein Arzt aufzusuchen.

Hinweise

Gynofit Befeuchtungs-Gel kann bei Bedarf täglich angewendet werden.

Gynofit kann nicht zur Empfängnisverhütung verwendet werden und enthält keine spermiziden Inhaltsstoffe.

Gynofit Befeuchtungs-Gel kann zusammen mit Kondomen angewendet werden.

Ohne Konservierungsmittel. Ohne Parfum. Ohne Parabene.


Mit LAG für eine lang anhaltende Feuchtigkeit.

Außer Reichweite von Kindern und bei Raumtemperatur (15-25°C) aufbewahren.

Verwendbarkeitsdatum siehe Packungsauflistung

Zusammensetzung nach INCI

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Sodium Hydroxide

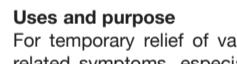

Made in Switzerland

Hersteller/Vertrieb CH:

Tenant AG, 4452 Itingen

Vertrieb D:

Tenant Deutschland GmbH,
53332 Bornheim-Walberberg

Vertrieb AT:

GYNCOM GmbH, 1210 Wien.

www.gynofit.com



FR

Mode de fonctionnement du gel hydratant Gynofit

Le gel hydratant Gynofit est un gel vaginal aqueux qui hydrate la muqueuse en formant un film hydratant sur la paroi vaginale.

Objectif thérapeutique

Le gel hydratant Gynofit est indiqué pour le traitement symptomatique de la sécheresse vaginale (en particulier lorsque les muqueuses sont fines, délicates et vulnérables) et des troubles correspondants.


Il supprime la sécheresse vaginale due à des modifications hormonales par ex. après un accouchement, le traitement d'un cancer et la ménopause, en particulier aussi durant la grossesse.

Le gel soulage en outre les symptômes à caractère irritatif comme les sensations de brûlures et les démangeaisons et contribue ainsi au bien-être physique.


Le gel hydratant Gynofit est aussi un lubrifiant idéal durant les rapports sexuels. Le gel hydratant Gynofit prévient les irritations.




1. Agiter le contenu du tube en direction de la pointe du tube.

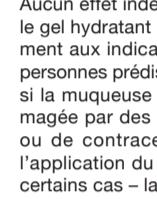

2. Briser la pointe du tube en faisant une rotation.

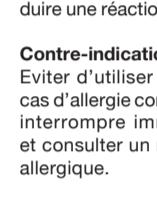


3. Introduire l'applicateur dans le vagin.

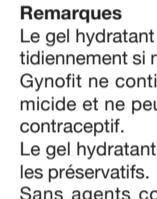


4. Appuyer sur le tube pour faire pénétrer tout le contenu dans le vagin.




1. Scuotere il tubetto per far scendere il contenuto verso la punta.

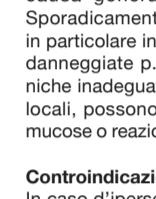

2. Ruotare l'aletta di chiusura fino a spezzarla.

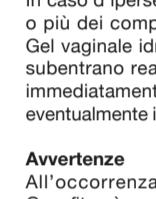

3. Introdurre la punta del tubetto-applicatore nella vagina.

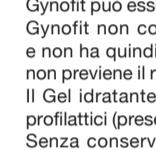

4. Premere sul tubetto per far fuoriuscire completamente il contenuto che si depositerà nella cavità vaginale.

Effets secondaires

Aucun effet indésirable ne devrait survenir si le gel hydratant Gynofit est utilisé conformément aux indications du fabricant. Chez les personnes prédisposées à cela, en particulier si la muqueuse vaginale a déjà été endommagée par des mesures de soin, d'hygiène ou de contraception locale inadéquates, l'application du gel peut aussi irriter – dans certains cas – la muqueuse vaginale ou produire une réaction allergique.

Contre-indications

Eviter d'utiliser le gel hydratant Gynofit en cas d'allergie connue à l'un des composants ; interrompre immédiatement le traitement et consulter un médecin en cas de réaction allergique.

Remarques

Le gel hydratant Gynofit peut être utilisé quotidiennement si nécessaire.

Gynofit ne contient aucun composant spermicide et ne peut donc pas servir de moyen contraceptif.

Le gel hydratant Gynofit est compatible avec les préservatifs.

Sans agents conservateurs. Sans parfum. Sans parabène.


Avec LAG pour une humidité de longue durée.

Conserver hors de portée des enfants et à une température ambiante de 15 à 25 °C.

Date limite d'utilisation : voir date imprimée sur l'emballage.

Composition (selon INCI) :

Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Hydroxyethylcellulose, Citric Acid, Levulinic Acid, P-Anisic Acid, Sodium Hydroxide

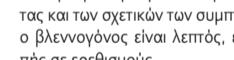

Made in Switzerland

Fabricant / Distribution CH :

Tenant AG, 4452 Itingen

Distribution D :


Tenant Deutschland GmbH,

53332 Bornheim-Walberberg

Distribution AT :

GYNCOM GmbH, 1210 Wien.

www.gynofit.com

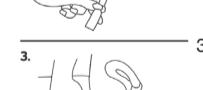

UK

How Gynofit Moisturising Gel works

Gynofit Moisturising gel is an aqueous preparation that forms a thin Moisturising film on the vaginal mucous membrane.

Uses and purpose

For temporary relief of vaginal dryness and related symptoms, especially if the mucous membrane is thin, sensitive, and irritation-prone.

The Moisturising gel helps relieve vaginal dryness resulting from hormonal changes during pregnancy and following delivery, cancer therapy, menopause, etc. Moreover, it makes you feel better by alleviating symptoms like burning and/or itching. Gynofit Moisturising gel also reduces discomfort during sexual intercourse and hinders genital irritation.

Side effects

Generally you should not experience any side effects, if you apply Gynofit Moisturising gel as directed. However, the vagina's mucous membrane may become irritated or allergic reactions may occur if you are predisposed to such conditions, particularly if the mucous lining was damaged by improper care/hygiene, or from use of local contraceptives.

Contraindications

Do not use Gynofit Moisturising gel if you have ever had an allergic reaction to any of its ingredients. If you experience such reactions, stop use immediately and consult your healthcare provider.

Caution

You can use Gynofit Moisturising gel daily, as needed.

This gel is not a contraceptive, since it contains no spermicides, but is safe for use with condoms.

Contains no preservatives, parabens or perfume.

With LAG for a long-lasting moisture.

Keep out of reach of children and store at 15-25 °C.

See packaging for expiry date.

Composition (according to INCI):

Water, glycerin, propylene glycol, hydroxyethyl cellulose, citric acid, levulinic acid, p-anisic acid, sodium hydroxide

Made in Switzerland

Hersteller/Vertrieb CH:

Tenant AG, 4452 Itingen

Vertrieb D:

Tenant Deutschland GmbH,
53332 Bornheim-Walberberg

Vertrieb AT:

GYNCOM GmbH, 1210 Wien.

www.gynofit.com

GR

Πώς λειτουργεί η Ενυδατική Γέλη Gynofit

Η Gynofit Κολπική Γέλη είναι ένα εφυγραντικό οσεύσαμα που σχηματίζει ένα λεπτό ενυδατικό φίλμ στον βλεννογόνο του κόλπου.

Θεραπευτικός Σκοπός και Χρήση

Για την πρωτιανή ανακούφιση της κολπικής ξηρότητας και των σχετικών των συμπτωμάτων ιδιαίτερα όταν ο βλεννογόνος είναι λεπτός, ευαίσθητος και επιρρεπής σε ερεθισμούς.


Η Ενυδατική γέλη βοηθά στην ανακούφιση από την οβελήση της εγκυμοσύνης, σε θεραπείες κατά την εμμηνόπαυση κλπ. Επιπλέον, σας κάνει να αισθάνεστε καλύτερα, ανακουφίζοντας από συμπτώματα όπως αισθηματική κνημού και κάσου. Η Gynofit Ενυδατική Γέλη μειώνει επίσης τις ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της συνουσίας και εμποδίζει την ερεθισμό των γεννητικών οργάνων.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Γενικά, δεν αναμένονται ανεπιθύμητες ενέργειες όταν χρησιμοποιείτε τη Gynofit Ενυδατική Γέλη συμφώνως με τις οδηγίες. Ωστόσο, ο βλεννογόνος του κόλπου μπορεί να ερεθιστεί ή να εμφανισθούν αλλεργικές αντιδράσεις από την εφαρμογή της γέλης.

Δεν περιέχει αρόμα, συντηρητικά ή παραβήνα.

Δεν φύλασσεται μακριά από παιδιά, σε θε

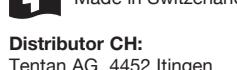

Distributor CH:
Tentan AG, 4452 Itingen

Distributor UK:
Tentan UK Ltd., Staffordshire, UK.

www.gynofit.co.uk

CE 1253

Σύνθεση INCI

Aqua, glycerol, propylene glycol, hydroxyethyl cellulose, citric acid, levulinic acid, p-anisic acid, sodium hydroxide

Παρασκευάζεται στην Ελβετία

Διανομέας Ελβετίας:
Tentan AG, 4452 Itingen

Αποκλειστικό Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Λ. Ιωνίας 166, 11144 Αθήνα,
Τηλ: 210 2014306

www.gynofit.gr

CE 1253

Sudétis (pagal INCI):

Vanduo, glicerinas, propilen glikolis, hidrosietilceliuozé, citrinų rūgštis, levulino rūgštis, p-anyžių rūgštis, natrio hidroksidas

Pagaminta Šveicarijoje

Platintojas CH:
Tentan AG, 4452 Itingen
Šveicarija

Platintojas LT
ViaMedPharma
Ažuolyno g. 7
Vilnius LT-07196

www.gynofit.lt

CE 1253

PT

Como funciona o Gynofit Gel Vaginal Hidratante

O gel hidratante Gynofit é um gel vaginal aquoso que hidrata a mucosa formando uma película sobre a parede vaginal.

Utilização e resultados

Para o alívio temporário da secura vaginal e sintomas associados, particularmente se a membrana da mucosa for fina, sensível e irritável.

Normaliza a flora vaginal e regula o pH. Acalma a comichão/ardor e alivia o corrimento.

O gel hidratante Gynofit ajuda no alívio do desconforto provocado pela secura vaginal,

resultante de alterações hormonais durante a gravidez, pós-parto, tratamento oncológico, menopausa, etc. Além disso, proporciona

uma sensação de conforto no alívio de sintomas tais como ardor ou comichão. O gel hidratante Gynofit também reduz o desconforto durante a relação sexual e evita a irritação genital.

Gynofit foi desenvolvido em colaboração com ginecologistas para o tratamento das situações de secura vaginal.

Como utilizar Gynofit?

Gynofit é um gel para introdução na vagina à

noite, na posição horizontal. Cada tubo corresponde a uma aplicação. O gel é colocado

directamente na vagina através do aplicador especialmente concebido para o efeito. Abrir a saqueta e seguir as instruções apresentadas: